


GUIDE 1 - Muggsopp

Identifikasjon av de mest vanlige muggsoppene på DG18 (III)

HUSK!

Petriskålene flyttes og vendes forsiktig, slik at muggsoppens usynlige sporer ikke spres.

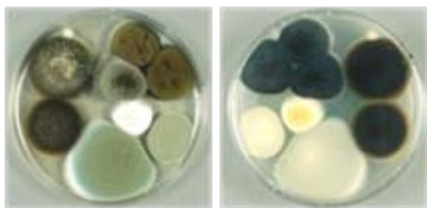

Velg en muggsopp i petriskålen din, start her og følg pilene.

Mørke- eller olivengrønne kolonier med **mørk** bakside

Lodne, løse kolonier
Bakside: brungrønn med trådet kant



Alternaria L-muggsopp

Fløyelsaktige, foldede, kompakte kolonier
Bakside: sortgrønn med hvit kant



Cladosporium C-muggsopp

Blågrønne, grågrønne eller hvite kolonier med **lys** bakside

Store, flate, ofte kornete kolonier



Penicillium P-muggsopp

Små, lett foldede, ofte hvitaktige kolonier




Aspergillus S-muggsopp

OBS! Hvis du ikke finner muggsoppen via denne nøkkelen, gå videre til GUIDE 3.

GUIDE 2 - Muggsopp


Identifikasjon av de mest vanlige muggsoppene på V8 (II)

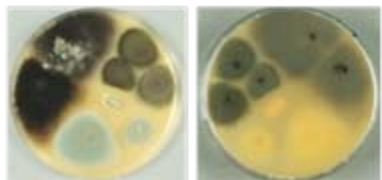

Velg en muggsopp i petriskålen din, start her og følg pilene.

Mørke- eller olivengrønne kolonier med **mørk** bakside

Store lodne, trådede kolonier

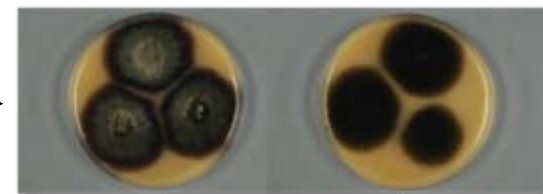

Alternaria

L-muggsopp

Små fløyelsaktige, kompakte kolonier



Cladosporium

C-muggsopp

Blågrønne, grågrønne eller hvide kolonier med **lys** bakside


Flate pulveraktige, ofte kornete kolonier



Penicillium

P-muggsopp

Små, svakt forhøyete, ofte hvitaktige kolonier

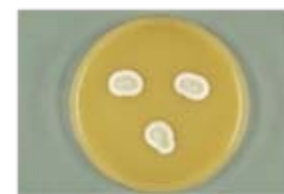


Aspergillus

S-muggsopp

OBS! Hvis du ikke finner muggsoppen via denne nøkkelen, gå videre til GUIDE 3.

GUIDE 3 - Muggsopp

Identifikasjon av de mer sjeldne muggsoppene DG 18 (III) & V8 (II)

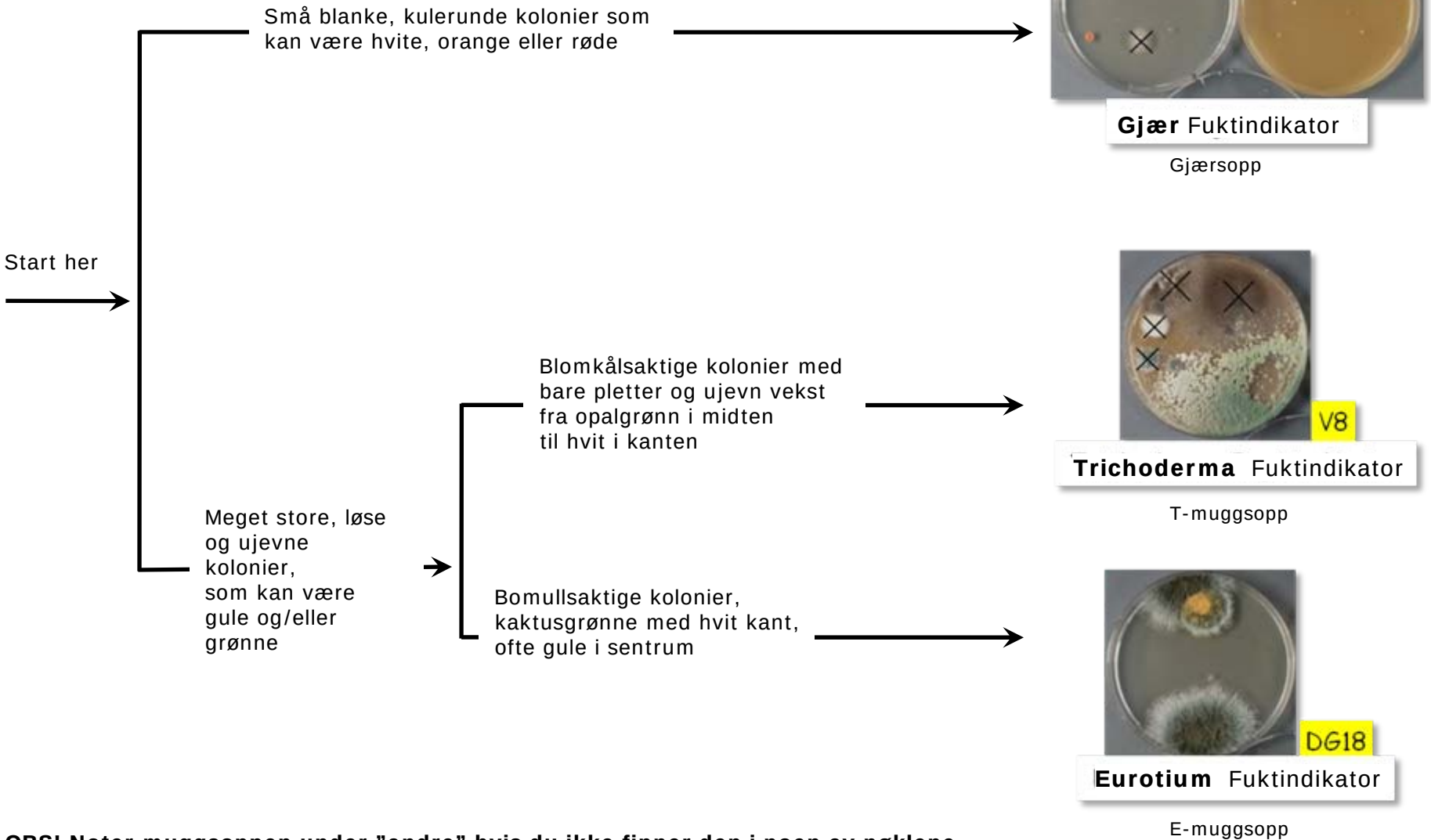

OBS! Noter muggsoppen under "andre" hvis du ikke finner den i noen av nøklene.




Forside av DG18

C = Cladosporium


L = Alternaria

S = Aspergillus


P = Penicillium

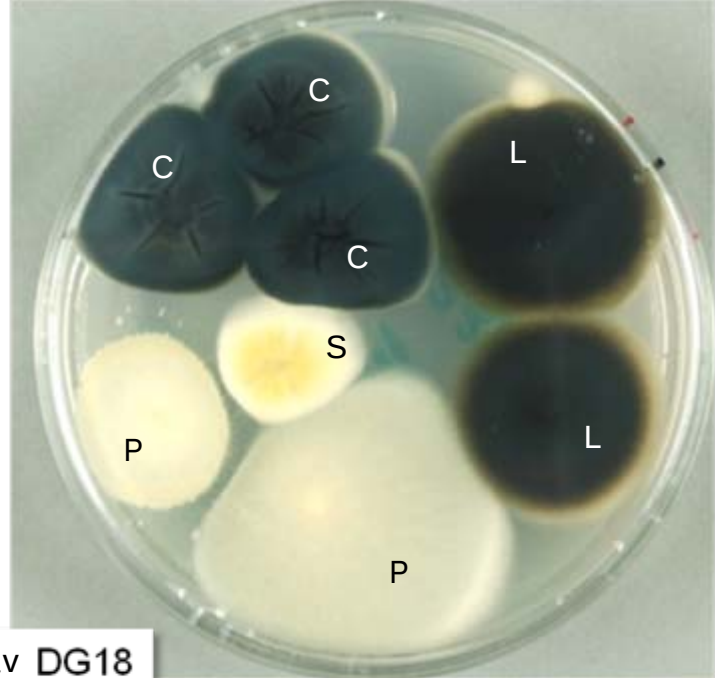

Bakside av DG18

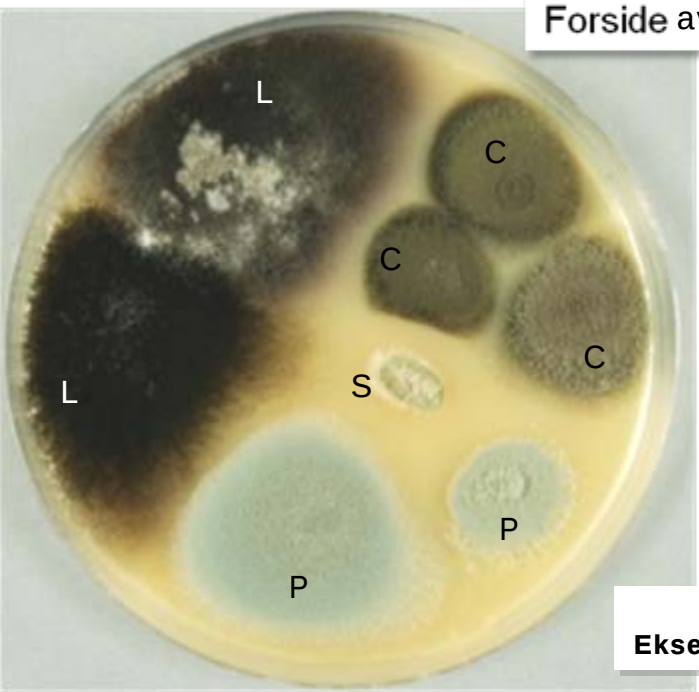

Forside av V8

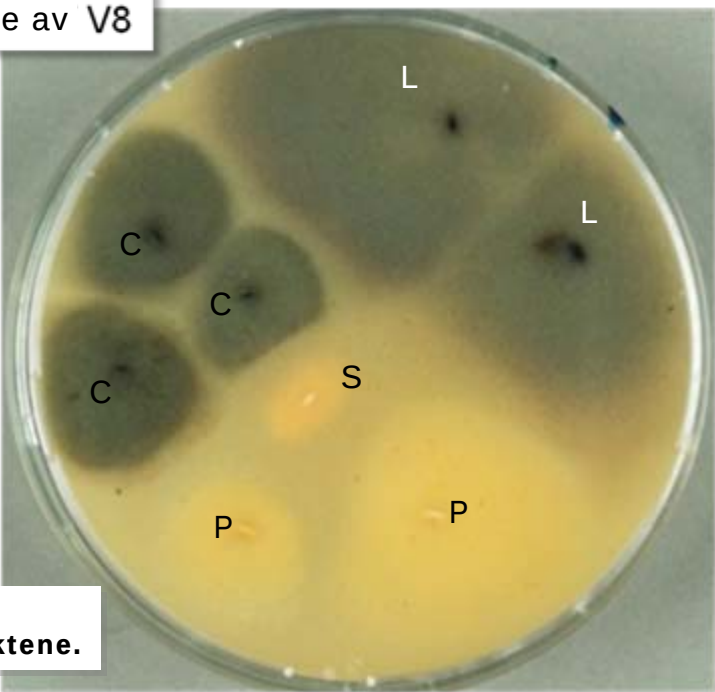

Bakside av V8

GUIDE 4 - Muggsopp
Eksempler på de fire mest vanlige slektene.

GUIDE 5 – Muggsopp

Beskrivelse av de mest vanlige muggsoppslektene og eksempel på vanlig dekningsgrad i skålen (i %).

	DG18 (III)	V8 (II)	Størrelse	Farge i midten av kolonien	Struktur	Overflate
C - Cladosporium	27 %	30 %	Liten/middels	Ensfarget: Mørkegrønn/brungrønn	Tett/kompakt	Fløyelsaktig
P - Penicillium	18 %	20 %	Middels/stor	Ensfarget: Lysegrøn/grønn/blågrønn	Tett/kompakt	Fløyelsaktig
S - Aspergillus	14 %	7 %	Stor	Ensfarget: Gyldegrønn/grønn/gressgrønn	Tynn/kornet	Hårete/bomullsaktig
E - Eurotium	5 %	1 %	Stor	Mangefarget: Gressgrønn/orangepepret grønn/gul	Tynn/kornet	Hårete/bomullsaktig
L - Alternaria	1 %	1 %	Middels/stor	Ensfarvet: Grønn/mørkegrønn	Tynn	Bomullsaktig/ru
T - Trichoderma	-	1 %	Stor	Ensfarget: Gressgrønn	Klumpete/lodden	
G - Gjær	10 %	12 %	Liten	Ensfarget: Hudfarget/gul/orange/rød	Tett/kompakt	Glatt/skinnende

De ulike muggsoppslektene kan ha arter som ser ganske forskjellige ut.